

類別: 機械器具 13 聴診器
 一般医療機器 一般的名称: 機械式聴診器 (JMDNコード: 13755000)

教育用聴診器(二人用) No. 164 II

【禁忌・禁止】


「使用方法」

- イヤピースが耳管に装着されていない場合は、使用しないでください。
 [耳管の金属部分で耳を傷つけることがあります。]

【形状・構造及び原理等】

本品は、チェストピース、チューブ、耳管で構成される。

聴診器外観図

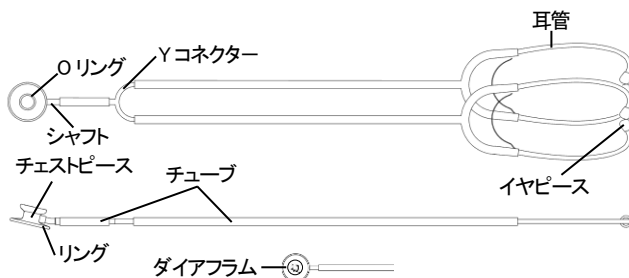

チェストピースから聴取された音はチェストピース中心部に位置する音道よりチューブ、耳管を通り左右の耳に送られます。

各部	原材料
チェストピース	アルミニウム
シャフト	真鍮 (クロームメッキ)
ダイアフラム	ガラスエポキシ
リング	亜鉛 (クロームメッキ)
Oリング	クロロブレンゴム
チューブ	ポリ塩化ビニール
Yコネクター	真鍮 (クロームメッキ)
耳管	真鍮 (クロームメッキ)
イヤピース	ポリプロピレン


【使用目的又は効果】

生体音を聞き取る。

(注意) 正確に聴診をするためには、静かな場所でご使用ください。

【使用方法等】

- ・使用する前に耳管の角度調整を下图のように行ってください。

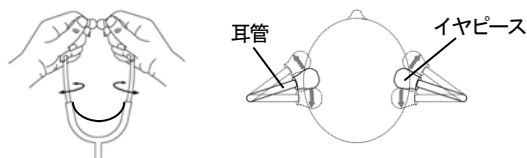

標準的な角度は18度です。

- ・耳孔に合わせイヤピースを耳に装着してください。
- ・チェストピースのダイアフラム面又はベル面を聞きたい面に合わせ静かに生体音の聴取を行ってください。
- ・聴診面の切替はシャフトを回転させてダイアフラム面とベル面を切替えることができます。

【使用上の注意】

- ・チェストピース (ダイアフラム面) を叩かないでください。
 [ダイアフラムを傷めたり、耳管を装着している場合には耳に障害をきたす可能性があります。]
- ・性能を十分に活用するためにリング、イヤピースの取付けが緩んでいないか確認してください。
 [緩んでいる場合は確実に装着してください。]
- ・ダイアフラム、リング、イヤピース等に傷がある場合は使用しないでください。
 [皮膚を傷つける可能性があります。]
- ・耳管、チューブ、チェストピースの音道の中に異物が入らないよう留意してください。
 [故障の原因になります。]

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・急激な温度変化のある所、極度に高温や低温になる所、湿度の高い所、直射日光の当たる所、ほこりの多い所、化学薬品の保管場所やガスの発生する所を避けてください。
- ・チューブを折り曲げたまま長時間放置しないでください。チューブの寿命が短くなります。

(耐用期間)

- ・チェストピース: 5年 (当社データによる)

【保守・点検に係る事項】

- ・チューブは皮脂等の影響で硬化が促進されます。
 保管条件によっては1年間程度のご使用でチューブが硬くなる場合がありますので、ご使用後は付着物をよく拭き取ってください。
- ・本器が汚れた時は、柔らかい布でからぶきをしてください。
 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布で汚れを落とした後、からぶきしてください。
- ・故障したときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

(製造販売業者および製造業者)

ケンツメディコ株式会社

TEL 0495-71-1001