



聴
診
器
選
び



は
じ
め
て
の

私の相棒だから
全てを知って
選びたい





マンガで
解説




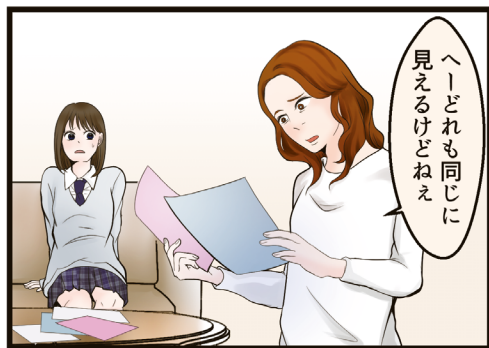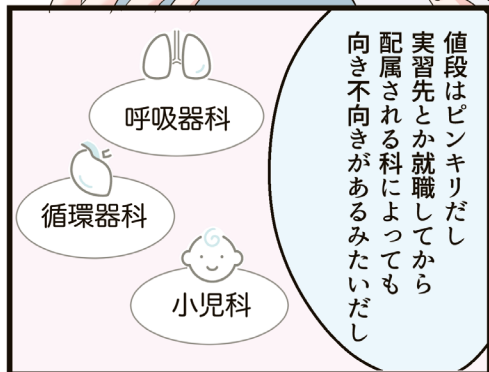

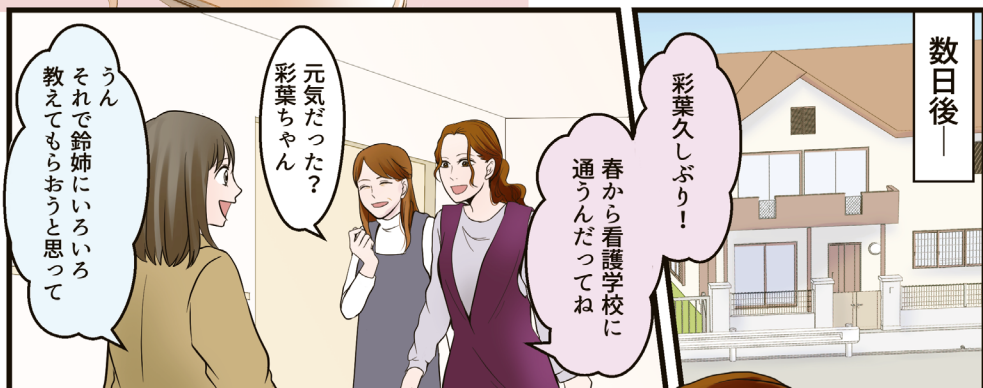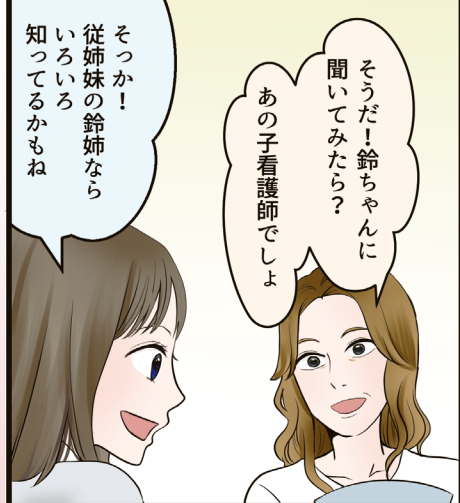

彩葉の従姉妹
たかつ すず
高津 鈴(25)

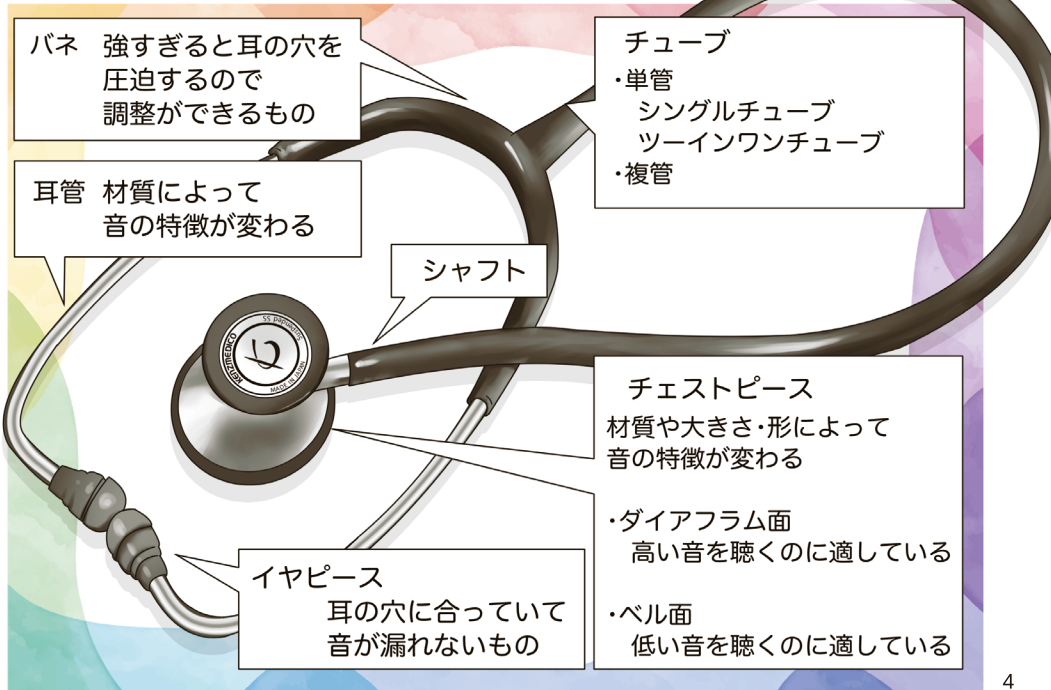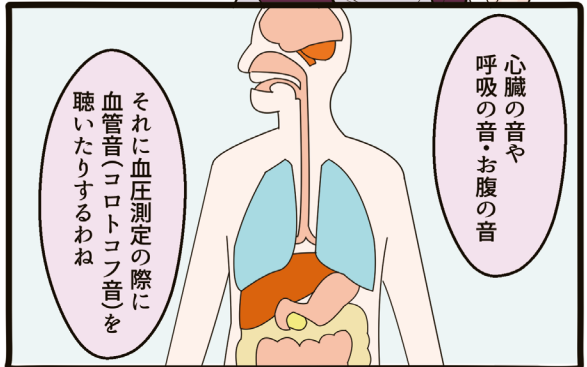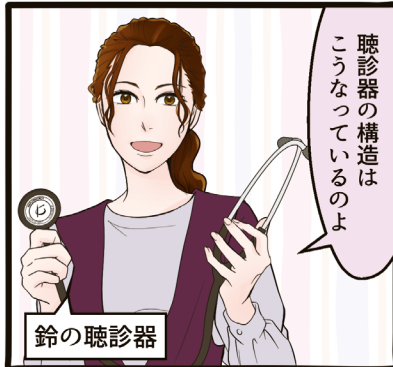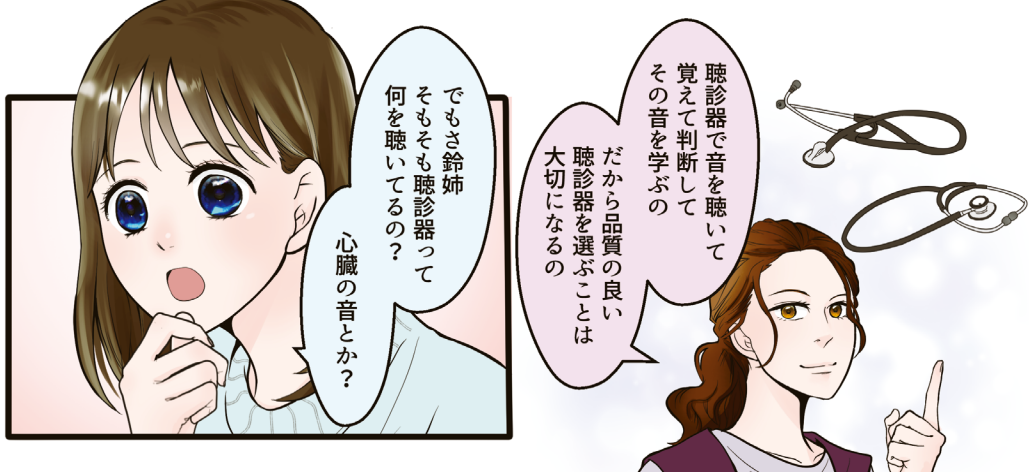


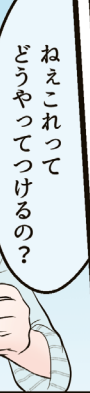


聴診器の装着方法

ケンツメディコの聴診器はいろいろな人の耳の角度に合うように耳管が動く

ハの字にしておく

装着して微調整

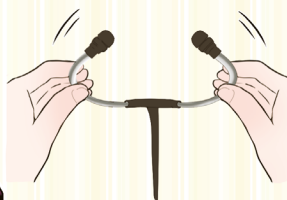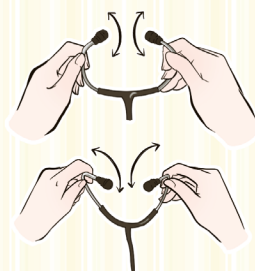


チェストピースの大きい面と小さい面の切り替え方


チェストピースの大きい面と小さい面の切り替え方法是这样よ

・チェストピースを回して大きい面と小さい面を切り替える

・シャフトのくぼみを確認
反対の面が使用できる
この場合は大きい面

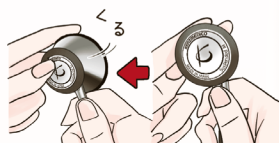




・振動板(膜)
こずってみて音がすればその面が使用できる

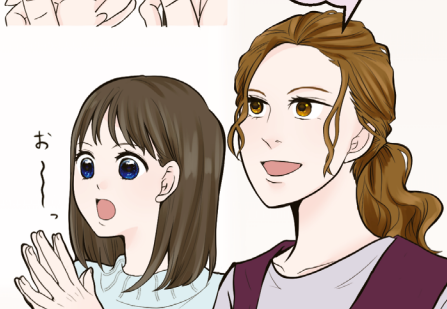


なるほど

自分の耳に合った使いやすい聴診器を選ぶってことだね

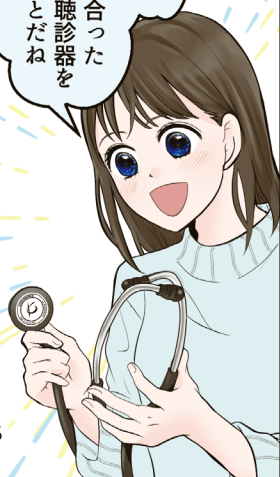

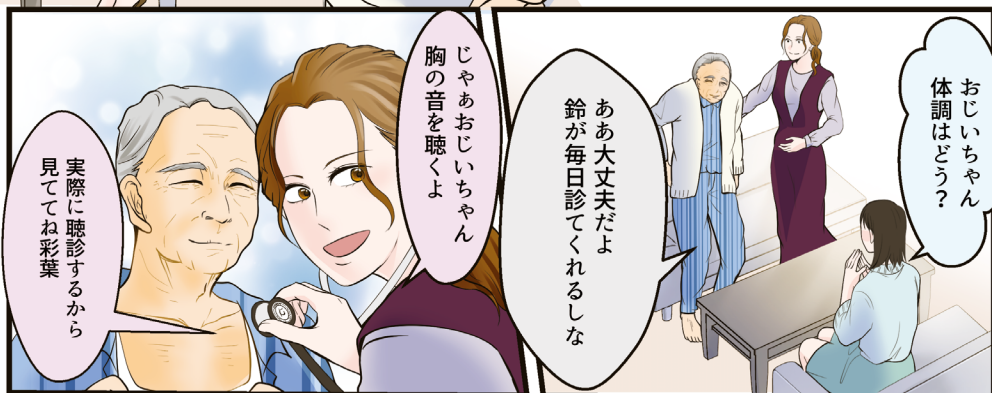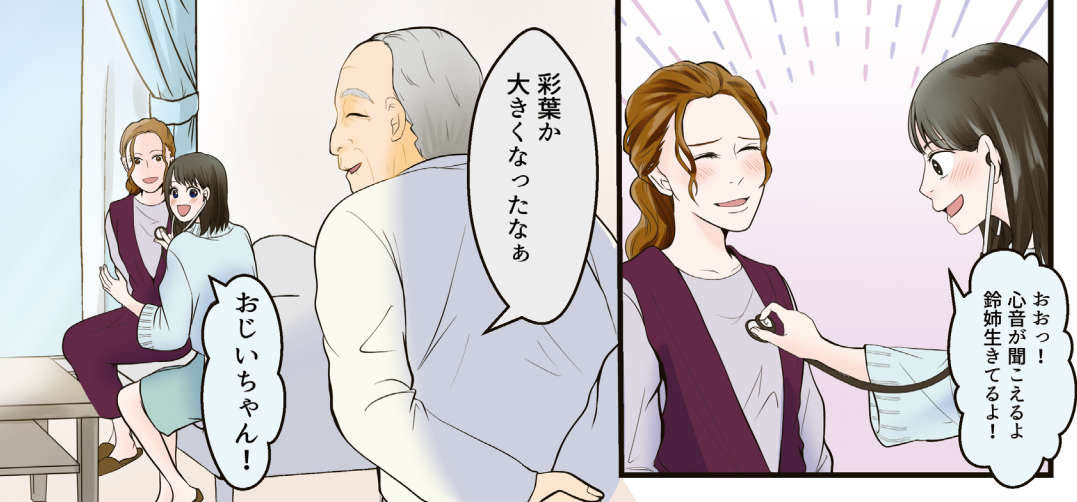

サスペンデッド型ダイアフラム

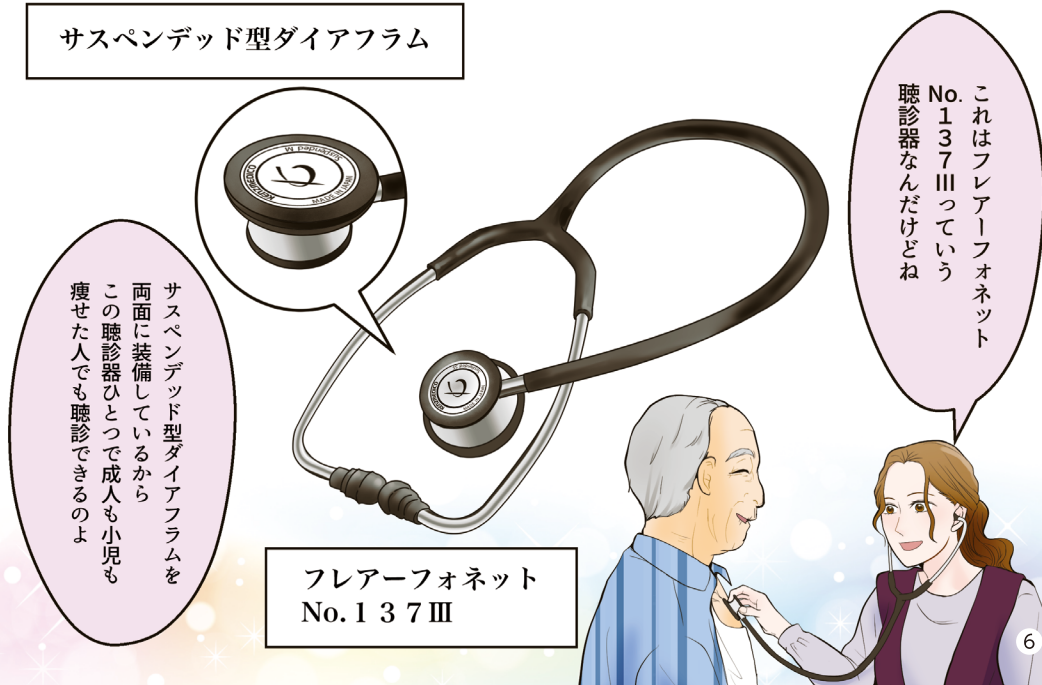

サスペンデッド型
ダイヤフラム

- ・軽くあてる→心臓の低い音が聴きやすい
- ・強くあてる→呼吸の高い音が聴きやすい

大きい面は成人用
小さい面は小児用
それぞれ変更・交換可能よ

成人用

小児用

スタンダード型
ダイヤフラムに
変更可能

ベル型に変更可能

専門分野の呼吸音、聞き取りの
難しい高い音が聴きやすい

心臓のⅢ音・Ⅳ音などの
低い音が聴きやすい

耳に優しい？

それに音もすごく良いし
耳に優しいのよ

へーそれはいいね

この聴診器はあてたときに
ヒヤツとしないんだよ






耳管の
角度調整ができる


バネが耳に優しくフィット

金属部分には
比重の重い
ステンレスを使用


イヤピースが
回転して耳への
摩擦を減らす

良い音が聞こえるように
きちんと装着できて
耳に優しい工夫が
してあるのよ

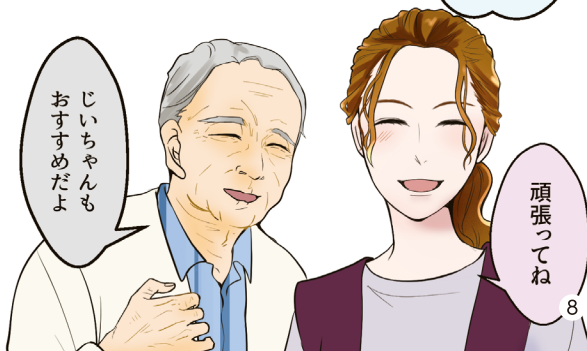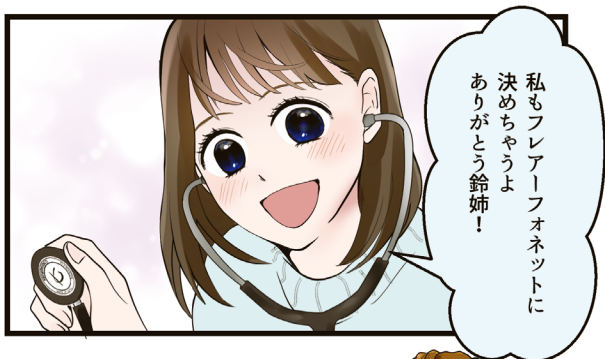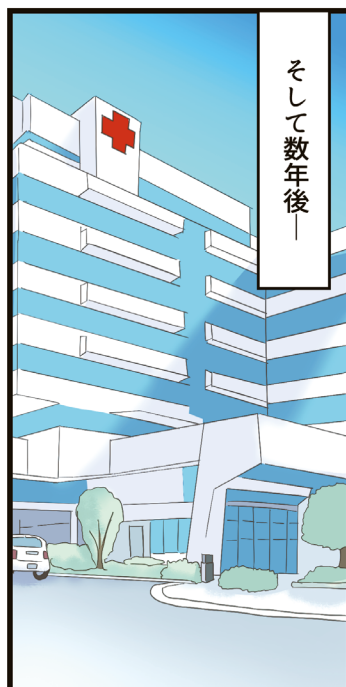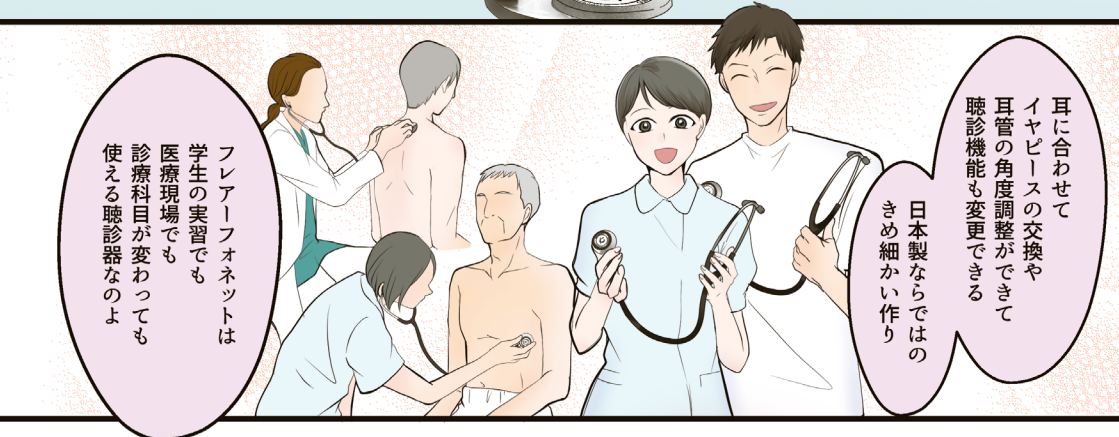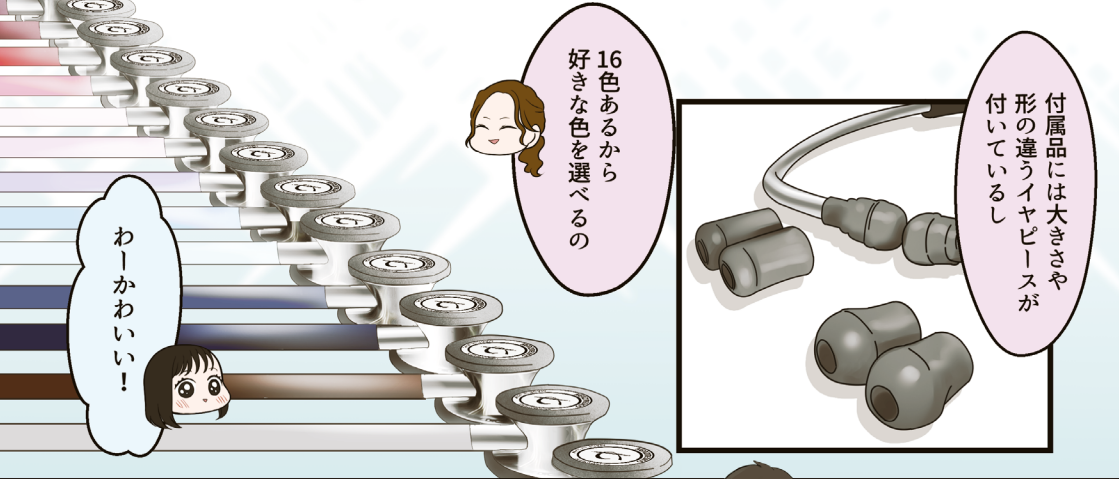


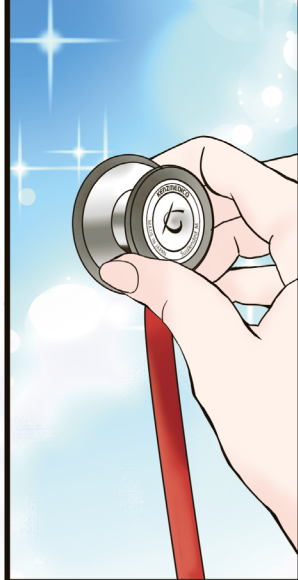


はい山本さん
すぐに伺いますね

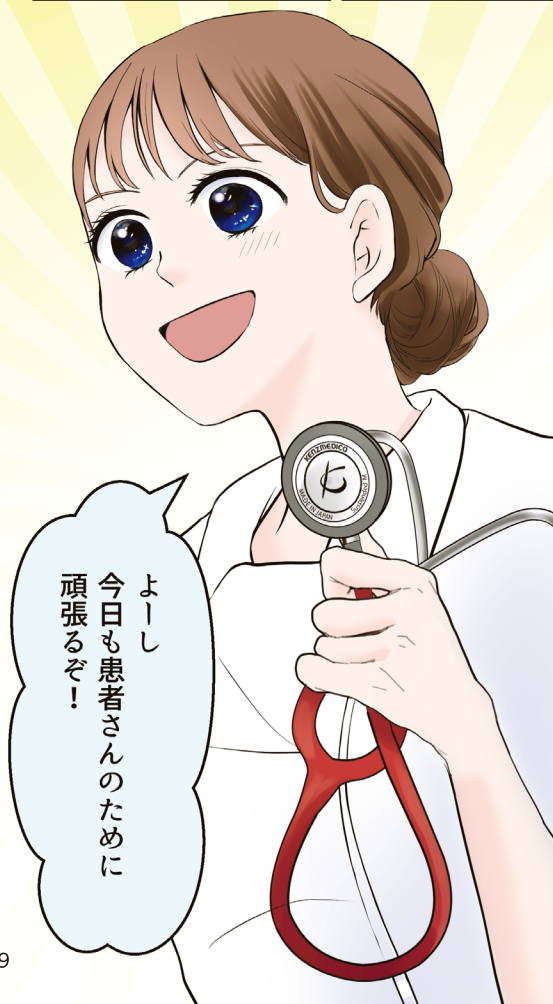

よし
今日も患者さんのために
頑張るぞ!

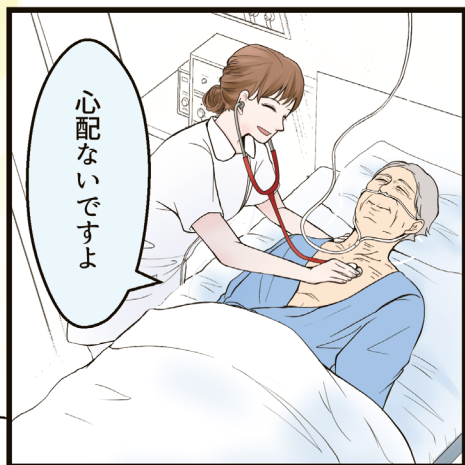

心配ないですよ

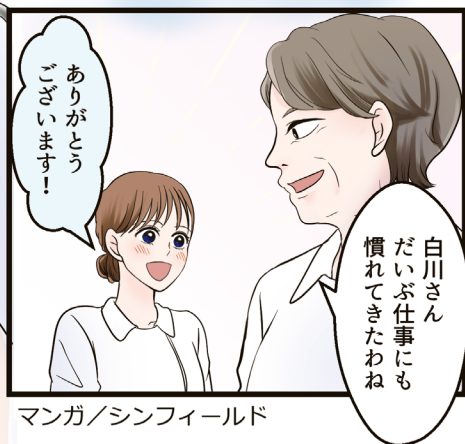

白川さん
だいたい仕事にも
慣れてきたわね

ありがとう
ございます!


マンガ/シンフィールド

FIT!

する理由

1

角度調節で耳にフィット

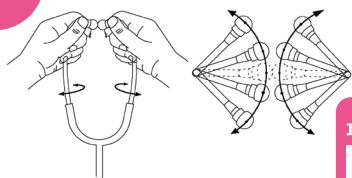

誰の耳にもびったり合う様に、耳管の角度調節ができます。
耳孔に確実にフィットさせることで、音を逃さず快適な着感を実現しました。

【動画】
耳管の角度調節




FIT!

する理由

2

回転ソフトイヤピース

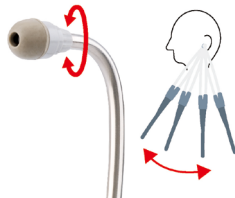

回転式にすることで、耳孔にイヤピースがフィットしたまま耳管が回転し、耳孔の摩擦を軽減します。

【動画】
回転ソフトイヤピース



品名

フレアフォネット ライト No.125Ⅱ

希望小売価格 ¥13,000(税別)
製造販売届出番号 11B2X00021125201

- 全 長 約720mm
- 重 量 約100g
- 付属品
ソフトイヤピース大1セット
シーリングチップ大・小1セットずつ
抗菌リング1枚
スタンダード型ダイアフラム1枚
カバーリング1枚

成人・小児
兼用モデル

装着時の
ストレス
軽減

アルミ製
軽量約
100g



カバーリング



小児用面に取り付けることで、スタンダードなダブル聴診器になります。



軽さで
選ぶなら
コレ！

詳しい特徴は
こちらから



説明動画



【成人用面は2WAY仕様】・サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムの交換可能。シーンに合わせて音を選べる。【小児用面はダイアフ
【優れた音響特性のステンレス製】・チェストピースと耳管は、優れた音響特性をもつステンレス製。フレアフォネット ライト No.125Ⅱ：【フレアフォネット

安心の日本製 / ケンツメディコの聴診器は

耳にやさしく FIT!

耳の中の
摩擦が
少なく快適!

長時間
つけても
痛くなり
にくい!



成人・小児
兼用モデル

重厚感ある
ステンレス
製

クリアな
音質
耳にやさしい
装着感

品名

フレアフォネット No.137Ⅲ

希望小売価格 ¥17,000(税別)
製造販売届出番号 11B2X00021137361

品名

フレアフォネット No.137Ⅲ ブラックエディション(特別仕様)

希望小売価格 ¥18,800(税別)
製造販売届出番号 11B2X00021137361

- 全 長 約720mm ●重 量 約175g
- 付属品 ソフトイヤピース大・小1セット
シーリングチップ大・小1セットずつ
抗菌リング1枚
スタンダード型ダイアフラム1枚
カバーリング1枚


詳しい特徴は
こちらから



プロモーション
動画



音質に
こだわるなら
コレ!

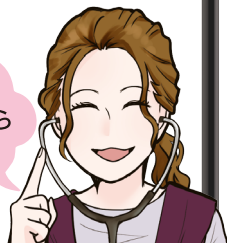

ケンツメディコオリジナル機能
回転ソフトイヤピース

耳孔の摩擦を軽減。

ケンツメディコオリジナル機能
耳管

音響特性に優れたステンレス製。
角度調節が可能。

ベル面に
変換可能



変換
機能
小児用面

2WAY
仕様
成人用面

パネ
(内パネ式)

適度な圧力で
程よく把持します。

チェストピース

音響特性に優れた
ステンレス製。

チューブ

肉厚チューブが
音を逃しません。

聴診可能な面を見分
けることができます。
シャフトにくぼみがある
と、その反対の面が使用可能。

付属品

シーリングチップ



より軟らかいシーリングチップは、
耳孔の形に馴染みやすく、遮音性
が向上します。※固式です。

ソフトイヤピース大



※ソフトイヤピース小は製品に標準装備さ
れております。

ダイアフラム、リング

スタンダード型
ダイアフラム

リング



※サスペンデッド型ダイアフラムは製品に
標準装備されております。ダイアフラムとリ
ングは一体型です。

製品特徴

【成人・小児兼用】・成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。この聴診器ひとつで、成人から小児まで聴診可能。
ラム面からベル面に交換可能】・ダイアフラムを外し、カバーリングを取り付けるとベル面になります。フレアフォネット No.137Ⅲ :
No.137Ⅲのライトウェイトバージョン】・アルミ製で軽量。・ポケットに入れて持ち運びがしやすいです。



KENZMEDICO

本社：埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1

■製品に関するお問い合わせ・カタログ請求

MAIL: eigyo@kenzmedico.co.jp

TEL : 0495-71-1001 / FAX: 0495-72-6716

ホームページ



LINE公式
アカウント



購入に関するご相談
修理・パーツの交換方法は
ケンツメディコ
LINE公式アカウントへ

ID: @629twcct