

# Doctorphonette NEO

ブラックエディション  
Black Edition



ドクターフォネットネオ No.188の特別仕様モデルです。

黒を超えた黒、ブラックエディション

- ◆ステンレス製
- ◆回転ソフトイヤピース
- ◆可動式耳管
- ◆TWO-IN-ONEチューブ
- ◆小児用チェンジャブル

## ■主な仕様

品名	ドクターフォネットネオNo.188	ドクターフォネットネオNo.188
カラー	ブラックエディション	ブラック/ネイビーブルー/バーガンディ ダークネイビー/ハンターグリーン/チョコレート
全長	約71cm	約71cm
重量	約200g	約200g
振動板面径	大φ49mm 小φ40mm	大φ49mm 小φ40mm
ベル面径	大φ35mm 小30mm	大φ35mm 小30mm
チェストピース	ステンレス(テフロンコーティング)	ステンレス
振動板	ガラスエポキシ	ガラスエポキシ
ディスク(大・小)	ステンレス(テフロンコーティング)	ステンレス
リング(大・小)	ポリカーボネート	ポリカーボネート
カバリング	シリコンゴム	シリコンゴム
耳管	ステンレス(テフロンコーティング)	ステンレス
チューブ	ポリ塩化ビニール	ポリ塩化ビニール
ソフトイヤピース(大・小)	シリコンゴム	シリコンゴム
シーリングイヤピース	シリコンゴム	シリコンゴム
希望小売価格	¥38,800(税別)	¥35,000(税別)
届出品目番号	11B2X00021188001	11B2X00021188001

■製品の仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ■全長、重量については多少の増減があります。 ■本体の保証は1年となっております。

製造販売業者

**ケンツメディコ株式会社**

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1  
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716  
ホームページ<http://www.kenzmedico.co.jp>

1302(10)0Y15



高級ステンレス聴診器

# ドクターフォネットネオ

No.188 KENZMEDICO



重厚なステンレスモデル  
**Doctorphonette NEO**

音響、機能、デザインすべてにゆるぎない信頼を——

**KENZMEDICO**

# Doctorphonette NEO

もっとも信頼される聴診器を目指して——

低音域から高音域にある微小な異常音を聞き逃さない構造を追求し、  
また振動板面・ベル面ともにパーツ交換を可能にし、  
シーンに応じて的確に対応できる聴診器。

## 美しく、使いやすく

ベル面から振動板面へと流れるような  
曲線を描き、指先にフィットするように仕上げました。  
シャフトやチューブなども、性能と美のバランスを考えて作り上げております。

### “音の質”へのこだわり

#### 回転ソフトイヤピース

音漏れによる音の減衰を防ぐ構造。

#### 耳管

優れた音響特性をもつ  
ステンレスを使用。

#### TWO-IN-ONEチューブ

左右独立経路をもち肉厚な  
チューブは、音をクリアなまま  
伝える。

#### チェストピース

優れた音響特性をもつステン  
レス製。

#### ダイヤフラム面(膜面)

微小な異常音を聞き逃さない  
ためのローカット・ハイパス構造。

#### ベル面

集音力を最大限に引き出した  
形状。

### 新しい常識 小児用チェンジابلル

ベル面・ダイヤフラム面(膜面)の両面とも、  
小児用に変換可能。  
小児の聴診や痩せた患者様の聴診に。



ベル面に小児用ベルをはめ込み、  
ダイヤフラム面(膜面)をディスク小に交換。




小児用ベル

ディスク小

### やさしくサポートする ための機能


#### 回転ソフトイヤピース

回転式にすることで、耳孔にイヤピースがフ  
ィットしたまま耳管が回転。耳孔の摩擦を軽減。

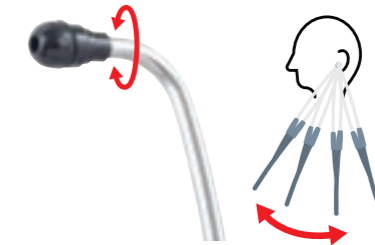

#### 可動式の耳管

耳管は角度調整が可能。耳孔に確実にフィット  
させることで、音を逃さず、快適な装着感。

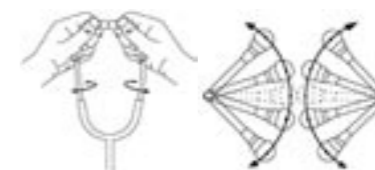

#### バネ

日本の焼入れ技術  
が生かされた丈夫  
でしなやかなバネ。  
長時間の装着でも  
耳孔に負担をかけ  
ないように圧着加  
減を調整可能。



### カラーバリエーション



ブラックエディション(特別仕様)



ブラック




ネイビーブルー



バーガンディ



ダークネイビー

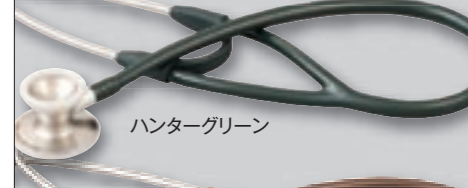


ハンターグリーン



チョコレート

### 標準付属品

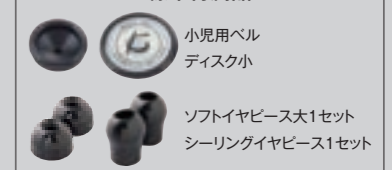

小児用ベル  
ディスク小

ソフトイヤピース大1セット  
シーリングイヤピース1セット