



パルスオキシメータ

# パルモニ®

KM-350 Pulmoni®

見やすくなった液晶画面  
ふしぎな、ふしぎな



Pulmoni®



小児

小児から成人まで  
測定可能



コーラルピンク ペールブルー ライラック リーフグリーン レモンイエロー

KENZMEDICO



パルスオキシメータ  
パルモニ® KM-350



Pulmoni®

安心・丈夫な純日本製  
信頼のMade in JAPAN

開発、製造、メンテナンス全てのプロセスを日本国内で一貫して行っています。

特長&便利な機能

▶ 指を入れるだけでSpO2値と脈拍値を自動測定

脈波検出マーク

脈拍の強さを4段階で表示します。

♥安定性マーク

測定状態がよいことを示しています。



脈拍数(回/分)

酸素飽和度  
(%SpO2)

表示反転ボタン

首から下げられるストラップ付き  
※強い力がかかると外れる安全設計の  
ストラップです。

▶ 見やすい大画面LCDディスプレイ  
明るい白色バックライト機能




▶ 小児から成人まで測定が可能

測定可能指周囲が30~66mmなので、小児から成人まで測定できます。



▶ 指先にフィットする二軸可動構造

本体可動イメージ

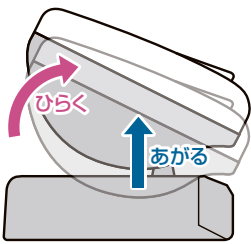

▶ ボタン一つで表示反転切替

対面測定・自己測定の  
用途によって表示切替  
が可能です。



▶ パルスオキシメータはさまざまなところで活躍中

■診察室で ■病棟でのバイタル測定時に ■介護施設で日々の状態把握に ■往診・訪問看護・訪問介護・薬剤管理指導に ■呼吸・心臓リハビリテーション時に ■術前・術中・術後管理に ■救急車両内でも ■歯科施術中に

SpO2とPaO2換算表

(体温37℃、PCO2 40torr、pH7.4、Hb15g/dL)

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| SpO2 %    | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98  | 99  |
| PaO2 torr | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 82 | 91 | 104 | 132 |

診療報酬点数 経皮的動脈酸素飽和度測定 30点(1日につき)

パルモニ® KM-350 希望小売価格 ¥34,000(税別)

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 測定方法     | 2波長吸光度測定法                          |
| 測定可能指周囲長 | 約30~66mm(爪付け根部指周囲)                 |
| 測定範囲     | 血中酸素飽和度(SpO2):0~100%               |
|          | 脈拍数:30~240回/分                      |
| 測定精度     | 血中酸素飽和度(SpO2):±2%(70%≤SpO2≤100%)   |
|          | 脈拍数:±3%、または±1ディジットの大きい方(30~240回/分) |
| 本体サイズ    | 約59(D)×36(W)×36(H)mm               |
| 本体重量     | 約40g(電池含まず)                        |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 電源                                   | 単4アルカリ電池2本                                   |
| 電池寿命                                 | 約4800回(1回約30秒)<br>連続使用の場合は約40時間              |
| 機器分類/クラス分類                           | 特定保守管理医療機器/クラスII                             |
| 医療機器認証番号                             | 226AFBZX00026000                             |
| 本製品はEMC規格IEC 60601-1-2:2007に適合しています。 |  |
| セット内容                                | 本体、ストラップ、単4アルカリ電池2本、<br>取扱説明書(保証書付)、添付文書、注意書 |
| メーカー保証期間 ご購入より1年間                    |  |

| カラー     | 品番       |
|---------|----------|
| コーラルピンク | 0350B001 |
| パールブルー  | 0350B002 |
| ライラック   | 0350B003 |
| レモンイエロー | 0350B004 |
| リーフグリーン | 0350B005 |

■別売  
SpO2計ポーチ  
希望小売価格 ¥900(税別)  
品番:1350F052

※製品の仕様は予告なく変更させていただくことがあります。

〈発売元〉

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1  
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716  
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>

〈製造販売業者〉

日本精密測器株式会社  
〒377-0293群馬県渋川市中郷2508-13