



ステンレス聴診器

フレアフォネットⅡ

No.137Ⅱ KENZMEDICO

Flairphonette Ⅱ



和製サスペンデッド搭載
オールステンレス聴診器



KENZMEDICO



2WAY仕様のダイヤフラム面


サスペンデッド型とスタンダード型のどちらのダイヤフラムもご使用いただけます。
(標準仕様) (標準付属品)

2WAY仕様のダイヤフラム面




サスペンデッド型ダイヤフラム

ボリューム感のある低音を聴診
(軽くあてたとき)

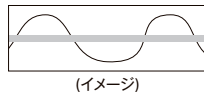

スタンダード型ダイヤフラム


澄んだきれいな高音を聴診
※呼吸音の聴診に、より適しています。

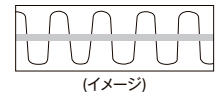

サスペンデッド型ダイヤフラム面

同一面で低音から高音まで聴診できます。

チェストピースを押しあてる力の強弱で低音を聴診したり、高音を聴診したりと切り替えることができます。

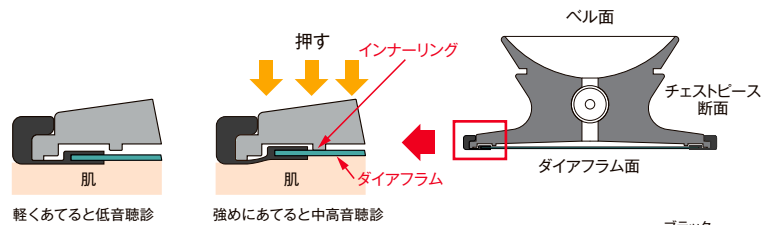

日本人の耳にやさしくフィットするように、日本人の感性で考えました。

可動式の耳管で角度調節

個々の外耳道の角度に合わせてられるようになっています。

回転式のソフトイヤピースで耳への負担を軽減

聴診器を装着した時には耳の中でイヤピースは固定されます。耳の中で余計な摩擦が起こらなくなり、耳への負担が軽減されるよう考えました。


適度な力できちんと装着

強すぎない適度な強さのバネで、耳が痛くなりにくいよう考えました。



選んで使えるイヤピース

付属品を含め4種類のイヤピースからご自分に合うイヤピースに付け替えてお使いいただけます。

※シーリングイヤチップに付け替えますと、回転はしません。

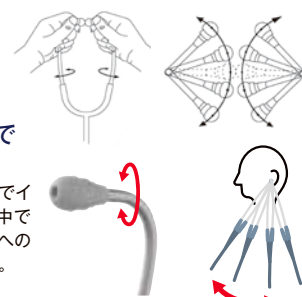

- ブラック 0137B701
- ネイビーブルー 0137B702
- セイルブルー 0137B703
- ライラック 0137B704
- スカイブルー 0137B705
- ピンク 0137B706
- ラスベリーピンク 0137B707
- パーガンディ 0137B708
- グレー 0137B709
- ダークネイビー 0137B710
- ハンターグリーン 0137B711
- チョコレート 0137B712
- パールピンク 0137B713
- パールブルー 0137B714
- パールプラム 0137B715
- 希望小売価格 ¥15,000(税別)
- ブラックエ디션 0137B726
- 希望小売価格 ¥16,800(税別)

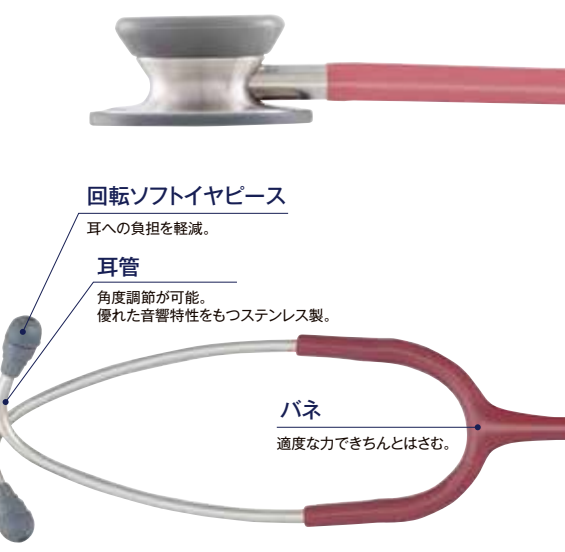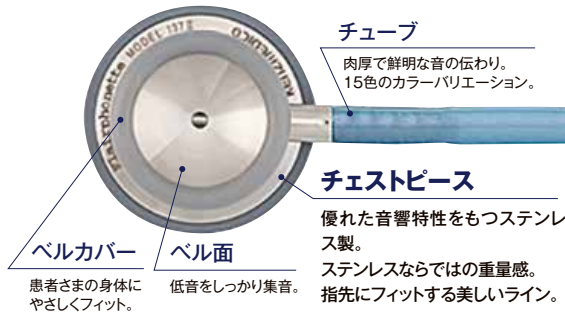

主な仕様

品名:フレアーフォネット No.137II
全長:約720mm
重量:約140g
ダイヤフラム面径:約φ48mm
ベル面径:約φ36mm
製造販売届出番号:11B2X00021137701

※仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。
※全長・重量には多少の増減がございます。
※本体の保証は1年となっております。

別売品/補充品	品名	品番	希望小売価格
ダイヤフラム	サスペンデッド型ダイヤフラム ブラック M 成人用	1137D011	¥1,800
	サスペンデッド型ダイヤフラム グレー M 成人用	1137D012	¥1,800
	137ダイヤフラム ブラック	1137D001	¥1,000
	137ダイヤフラム グレー	1137D002	¥1,000
リング	抗菌リング ブラック	1110F801	¥1,400
	抗菌リング ダークグレー	1110F802	¥1,400
ベルカバー	カバーリング181 ブラック	1181F801	¥800
	カバーリング181 ダークグレー	1181F802	¥800
イヤピース	ソフトイヤピースセット ブラック(大小)	1138F511	¥1,200
	ソフトイヤピースセット ダークグレー(大小)	1138F513	¥1,200
その他	その他のパーツについてはWEBでご確認ください。	-	-

注)パーツの色調変更(淡いグレーから濃いグレーに変更)に伴い、「抗菌リング ダークグレー」「カバーリング181 ダークグレー」「ソフトイヤピースセット ダークグレー(大小)」は、品名・品番が変更になっております。また、「サスペンデッド型ダイヤフラム グレー M 成人用」は品名・品番はそのままで、色調が濃いグレーから濃いグレーへと変更になっております。

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>