



ステンレス聴診器

フレアフォネットⅡ

No.137Ⅱ KENZMEDICO

Flairphonette Ⅱ



和製サスペンデッド搭載
オールステンレス聴診器



KENZMEDICO

聴診器の新常識 音が選べる2WAY仕様

2WAY仕様のダイヤフラム面

サスペンデッド型とスタンダード型のどちらのダイヤフラムもご使用いただけます。
(標準仕様) (標準付属品)

2WAY仕様のダイヤフラム面




サスペンデッド型ダイヤフラム

ボリューム感のある低音を聴診
(軽くあてたとき)




スタンダード型ダイヤフラム

澄んだきれいな高音を聴診
※呼吸音の聴診に、より適しています。

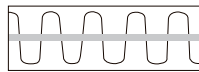

サスペンデッド型ダイヤフラム面


同一面で低音から高音まで聴診できます。
チェストピースを押しあてる力の強弱で低音を聴診したり、高音を聴診したりと切り替えることができます。

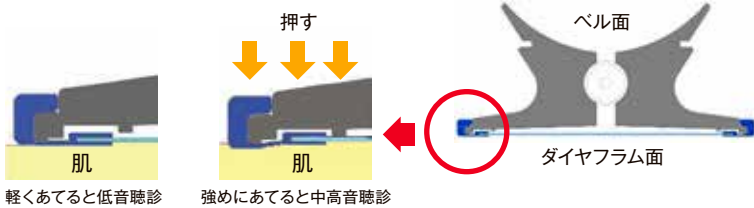

日本人の耳にやさしくフィットするように、日本人の感性で考えました。


可動式の耳管で角度調節

個々の外耳道の角度に合わせてられるようになっています。

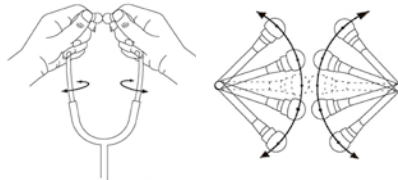

回転式のソフトイヤピースで耳への負担を軽減

聴診器を装着した時には耳の中でイヤピースは固定されます。耳の中で余計な摩擦が起こらなくなり、耳への負担が軽減されるよう考えました。

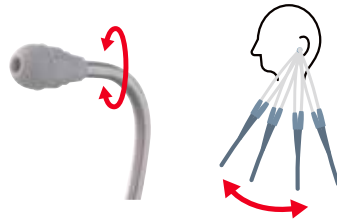

適度な力できちんと装着

強すぎない適度な強さのバネで、耳が痛くなりやすいよう考えました。

選んで使えるイヤピース

付属品を含め4種類のイヤピースからご自分に合うイヤピースに付け替えてお使いいただけます。

※シーリングイヤピースに付け替えますと、回転はしません。



Flairphonette II

カラーバリエーション



【仕様】
品名：フレアフォネットNo.137 II
全長：約72cm
重量：約140g
振動板面径：約φ48mm
ベル面径：約φ36mm
標準付属品：
・ダイヤフラム 1枚
・リング 1個
・ソフトイヤピース(大) 1セット
・シーリングイヤピース(大) 1セット
・シーリングイヤピース(小) 1セット

製造販売届出番号
11B2X00021137701
※仕様は改良のため予告なく変更させていただきます。
※全長・重量には多少の増減がございます。
※本体保証1年

希望小売価格
¥15,000(税別)

ブラックエディション
希望小売価格
¥16,800(税別)

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>