



ステレオ聴診器

ステレオフォネット **プレミアム**

No.175 KENZMEDICO

Stéréophonette *Premium*

新たな価値観に出会う
ステレオフォネットの進化形

Japan mind and quality



KENZMEDICO

ステレオフォネット プレミアム No.175

ステレオシリーズ 最上級の膜面性能！ スタイリッシュな チェストピースフォルム！

— 音の強弱/高低といった情報に加え、時間差/位相差情報が伝わります。

— 音や音源の方向/動き/広がり感などを聴き分けることができます。

— チェストピースはシリーズトップのスタイリッシュなデザイン。
磨き抜かれた鏡面仕上げ。


— チェストピース・リング・耳管はステンレス製。



ステレオフォネットの構造と原理

断面図

伝音イメージ

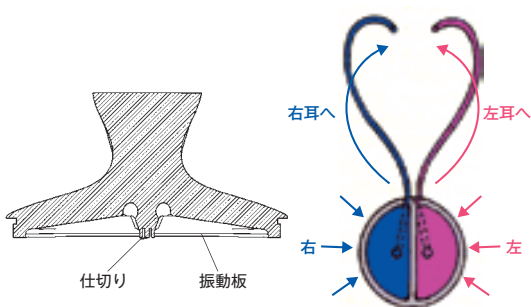

チェストピースは中央の仕切りで左右完全独立構造。
右の音は右耳へ、左の音は左耳へ伝える。

■ブラック Black



front



back



side

■ブラックエディション BlackEdition



front



back



side

標準付属品



- ①ステレオ用振動板1セット
- ②ソフトイヤピース大1セット(ブラック)
- ③ソフトイヤピース小1セット(ブラック)
- ④シーリングイヤチップ大1セット(マットブラック6Φ)
- ⑤シーリングイヤチップ小1セット(マットブラック6Φ)

品名	ステレオフォネット プレミアム No.175	
カラー	ブラック	ブラックエディション
チェストピース	ステンレス	
振動板	エポキシテロン	
リング	ステンレス	
耳管	ステンレス	
チューブ	TWO-IN-ONEチューブ(ポリ塩化ビニール)	
全長	約700mm	
重量	約250g	
希望小売価格	¥58,000(税別)	¥62,000(税別)
製造販売届出番号	11B2X00021175001	

■製品の仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

■全長、重量については多少の増減があります。

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>