



ライトウェイト聴診器

フレアフォネット ライト

No.125 KENZMEDICO

Flairphonette *light*



扱いやすい軽量設計
和製サスペンデッド搭載

KENZMEDICO

Flairphonette light

フレアーフォネットのライトウェイトバージョン

扱いやすい軽量型

優れた機能と性能はそのまま踏襲

◆2WAY仕様のダイアフラム面

サスペンデッド型とスタンダード型のどちらのダイアフラムもご使用いただけます。
(標準仕様) (標準付属品)

2WAY仕様のダイアフラム面




一体型のダイアフラムを採用

リング ダイアフラム

サスペンデッド型ダイアフラム


ボリューム感のある低音を聴診
(軽くあてたとき)

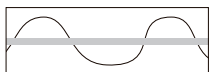

(イメージ)

スタンダード型ダイアフラム


澄んだきれいな高音を聴診
※呼吸音の聴診に、より適しています。

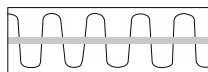

(イメージ)


◆サスペンデッド型ダイアフラム面

同一面で低音から高音まで聴診できます。
チェストピースを押しあてる力の強弱で低音を聴診したり、高音を聴診したりと切り替えることができます。

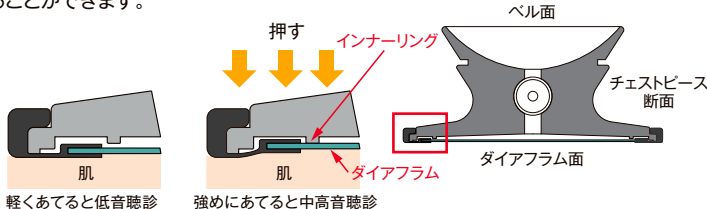

軽くあてると低音聴診

強くあてると中高音聴診

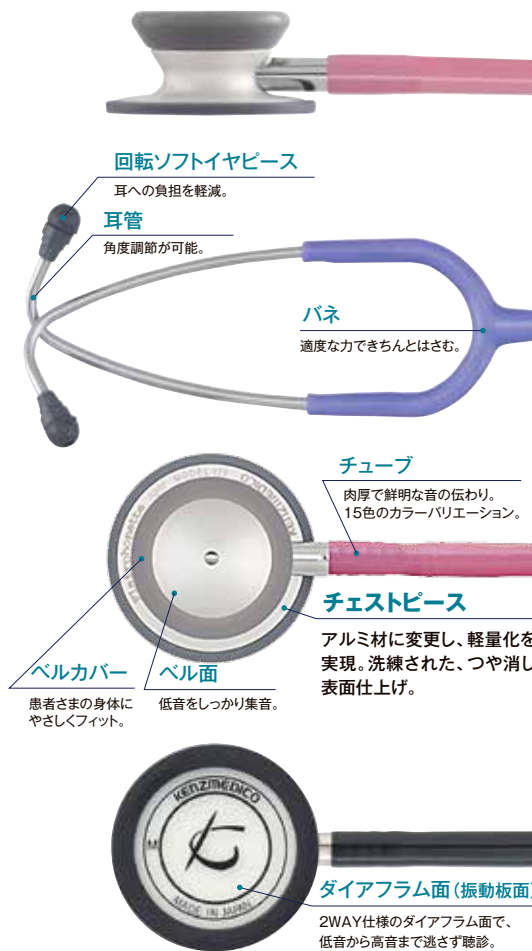

回転ソフトイヤピース

耳への負担を軽減。

耳管

角度調節が可能。

バネ

適度な力できちんとはさむ。

チューブ

肉厚で鮮明な音の伝わり。
15色のカラーバリエーション。

チェストピース

アルミ材に変更し、軽量化を実現。洗練された、つや消し表面仕上げ。

ベルカバー

ベル面

患者さまの身体にやさしくフィット。

低音をしっかりと集音。


ダイアフラム面 (振動板面)

2WAY仕様のダイアフラム面で、低音から高音まで逃さず聴診。

日本人の耳にやさしくフィットするように、日本人の感性で考えました。

◆可動式の耳管で角度調節

個々の外耳道の角度に合わせて調節できるようになっています。

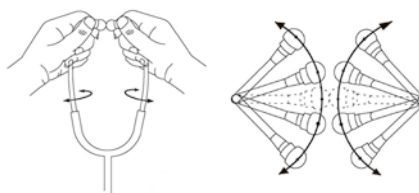

◆回転式のソフトイヤピースで耳への負担を軽減

聴診器を装着した時には耳の中でイヤピースは固定されます。耳の中で余計な摩擦が起こらなくなり、耳への負担が軽減されるよう考えました。


◆適度な力できちんと装着

強すぎない適度な強さのバネで、耳が痛くなりづらいよう考えました。

◆選んで使えるイヤピース

付属品を含め4種類のイヤピースからご自分に合うイヤピースに付け替えてお使いいただけます。

※シーリングイヤチップに付け替えますと、回転はしません。

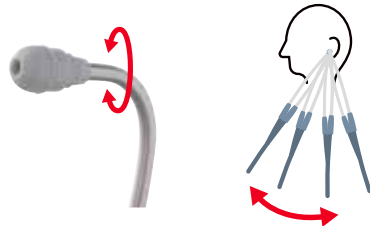

- ブラック 0125B001
- ネイビーブルー 0125B002
- セイルブルー 0125B003
- ライラック 0125B004
- スカイブルー 0125B005
- ピンク 0125B006
- ラスベリーピンク 0125B007
- パーガンディ 0125B008
- グレー 0125B009
- ダークネイビー 0125B010
- ハンターグリーン 0125B011
- チョコレート 0125B012
- パールピンク 0125B013
- パールブルー 0125B014
- パールプラム 0125B015

希望小売価格
¥12,000(税別)

主な仕様

品名:フレアーフォネット ライト No.125
全長:約720mm
重量:約100g
ダイアフラム面径:約φ48mm
ベル面径:約φ36mm
製造販売届出番号:11B2X00021125001

※仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。
※全長・重量には多少の増減がございます。
※本体の保証は1年となっております。

別売品/補充品	品名	品番	希望小売価格
ダイアフラム	サスペンデッド型ダイアフラム ブラック M 成人用	1137D011	¥1,800
	サスペンデッド型ダイアフラム グレー M 成人用	1137D012	¥1,800
	スタンダード型ダイアフラム ブラック M 成人用	1188D041	¥1,000
リング	抗菌リング ブラック	1110F801	¥1,400
	抗菌リング ダークグレー	1110F802	¥1,400
ベルカバー	カバーリング181 ブラック	1181F801	¥800
	カバーリング181 ダークグレー	1181F802	¥800
イヤピース	ソフトイヤピースセット ブラック(大小)	1138F511	¥1,200
	ソフトイヤピースセット ダークグレー(大小)	1138F513	¥1,200
その他	その他のパーツについてはWEBでご確認ください。	-	-

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ http://www.kenzmedico.co.jp